

KARTA PRODUKTU


ZESTAW **QUALIS DENTAL 3D**

DO TESTÓW PODSTAWOWYCH RTG

TOMOGRAF WIĄZKI STOŻKOWEJ · CBCT 3D

PAKIET WDROŻENIOWY **QUALIS START ↗**

Dostarczamy **pełne wdrożenie i wsparcie** w samodzielnym wykonywaniu Testów Podstawowych.
Od zakupu fantomu do pierwszego raportu z testów - **QUALIS START**.

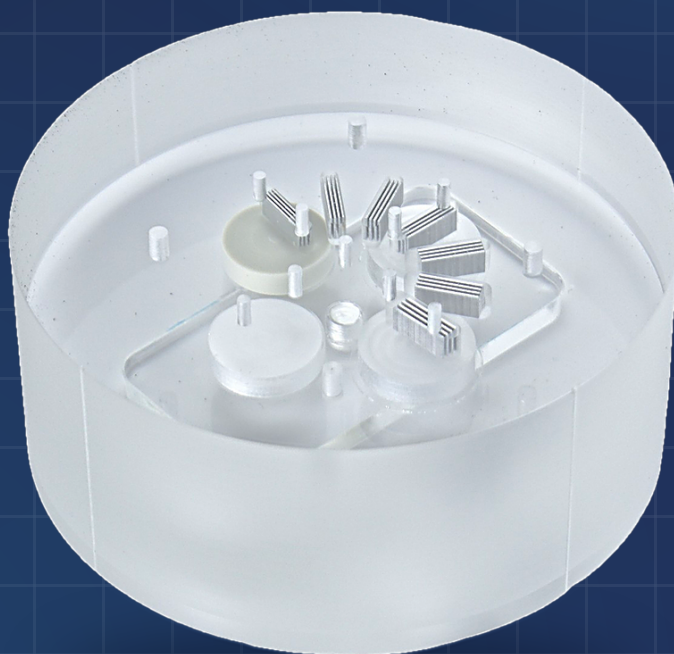

ZESTAW QUALIS DENTAL 3D

ZASTOSOWANIE: Tomograf stomatologiczny CBCT | 3D

W ZESTAWIE

Fantom · walizka · statyw regulowany · instrukcja obsługi, wzory raportów z testów (automatyczne obliczenia wyniku i oceny testu). Komplet do testów podstawowych aparatów CBCT | 3D.

ZAKRES TESTÓW

- Ocena artefaktów
- Ocena poziomu szumów
- Ocena jednorodności obrazu
- Ocena rozdzielczości wysokokontrastowej
- Ocena geometrycznej poprawności obrazu
- Ocena stabilności wartości **HU** dla różnych tkanek

ZGODNOŚĆ

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12.12.2022 r. w sprawie testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych (Dz. U. 2022 poz. 2759).

DANE TECHNICZNE

- Pełna specyfikacja - do pobrania na www.radiomed-radiologia.pl



FANTOM QUALIS DENTAL 3D



WALIZKA TRANSPORTOWA



STATYW REGULOWANY

OPCJONALNIE (REKOMENDOWANE) - pełne wdrożenie personelu do wykonywania testów.

PAKIET WDROŻENIOWY

QUALIS START

Od SZKOLENIA przez TESTY po gotowy RAPORT



1 SZKOLENIA

Pełen cykl testów podstawowych. Krok po kroku wykonywane i omawiane wszystkie testy.



2 RAPORTY

Wzory raportów omówione punkt po punkcie - co wpisać, jak czytać wynik i ocenę testu.



3 TESTY

Pierwszy pełen cykl testów na aparacie, z gotowym raportem z testów.



4 CERTYFIKATY

Certyfikat uczestnictwa dla każdej przeszkolonej osoby.



5 WSPARCIE

Kontakt telefoniczny i mailowy przy kolejnych testach.

SZKOLENIE W WYBRANEJ FORMIE



SZK-STAC

Stacjonarnie

Dojeżdżamy do placówki - szkolenie z testów na aparacie - wykorzystując fantomy w praktyce.



SZK-LIVE

Online na żywo

Sesja z wykładownicą w czasie rzeczywistym - pytania i pokaz testów krok po kroku - na bazie prezentacji.



SZK-VOD

Nagranie wideo

Film instruktażowy, dostęp bez ograniczeń czasowych. Pytania telefoniczne i mailowe.

EFEKT WDROŻENIA: Testy Podstawowe wykonywane samodzielnie.

ZESTAW QUALIS DENTAL 3D

ZASTOSOWANIE: Tomograf wiązki stożkowej · CBCT 3D

DANE techniczne

- Wymiar zewnętrzny - **średnica 100 mm, wysokość 50 mm**
- Warstwa jednorodna - średnica 100 mm, grubość 10 mm
- Warstwa geometrii: **4 pręty** wys. 10 mm i śr. 3 mm na planie kwadratu 40 mm oraz **9 otworów** wys. 10 mm i śr. 2 mm na planie krzyża co 10 mm
- Warstwa rozdzielczości: **7 obiektów wysokokontrastowych**, wzory od **17 do 11 LP/cm** ze skokiem 1
- Warstwa materiałowa - **4 obiekty**: woda (1,00 g/cm³), powietrze (1,2 kg/m³), PP (0,91 g/cm³), PTFE (2,2 g/cm³)

PRODUKT - QUALIS DENTAL 3D



ZESTAW QUALIS DENTAL 3D

Mają Państwo pytania techniczne? Doradzimy i dobierzemy konfigurację do Państwa aparatu.

biuro@radiomed-radiologia.pl · 510 447 870

KONTAKT I ZAMÓWIENIA

Porozmawiajmy o Państwa gabinecie

Doradzimy, który fantom i który wariant odpowiada Państwa aparatom. Przygotujemy ofertę na sam fantom albo z **Pakiem wdrożeniowym QUALIS START**.

SPRZEDAŻ FANTOMÓW

tel. 510 447 870

biuro@radiomed-radiologia.pl

PAKIET WDROŻENIOWY QUALIS START

Szkolenie, pierwsze testy
gotowy raport z testów i certyfikat



ZAPYTANIE W 10 SEKUND

Proszę zeskanować telefonem - otworzy się gotowa wiadomość z tematem.
Wystarczy dopisać model aparatu.

KATALOG RADIOGRAFIA

Testują Państwo także aparaty kostno-płucne, przyłóżkowe, ramię-C lub angiograf? Mamy dla nich osobny katalog:
Fantomy QUALIS - Radiografia, Fluoroscopia i Angiografia. Prześlemy na życzenie.