

KARTA PRODUKTU


ZESTAW **QUALIS INTEGRA RAD**

DO TESTÓW PODSTAWOWYCH RTG


APARATY KOSTNO-PŁUCNE · PRZYŁÓŻKOWE

PAKIET WDROŻENIOWY **QUALIS START** ↗

Dostarczamy **pełne wdrożenie i wsparcie** w samodzielnym wykonywaniu Testów Podstawowych.
Od zakupu fantomu do pierwszego raportu z testów - **QUALIS START**.

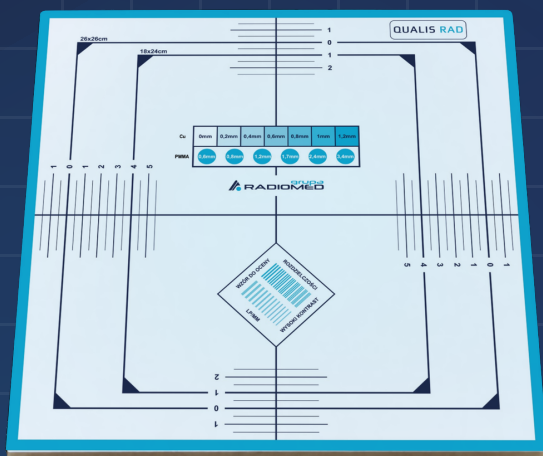

FANTOM QUALIS RAD

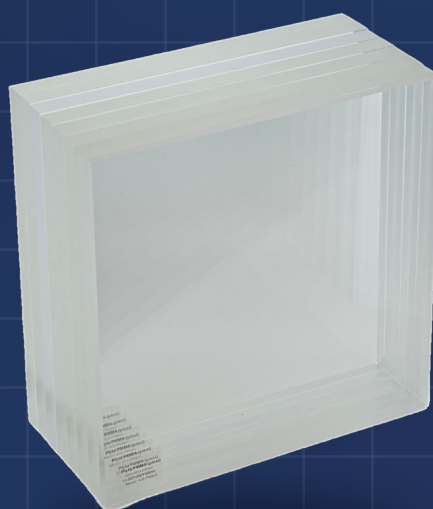

FANTOM QUALIS PMMA

FANTOM QUALIS RAD

ZASTOSOWANIE: Aparaty kostno-płucne (ogólnodiagnostyczne) · przyłóżkowe

W ZESTAWIE

Fantom QUALIS RAD w wybranym wariantcie wyposażenia - od samego fantomu po komplet z walizką i uchwytem. Instrukcja obsługi i wzory raportów z testów (automatyczne obliczenia wyniku i oceny testu).

ZAKRES TESTÓW


- Kolimacja i geometria wiązki
- Rozdzielczość wysokokontrastowa
- Rozdzielczość niskokontrastowa

ZGODNOŚĆ

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12.12.2022 r. w sprawie testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych (Dz. U. 2022 poz. 2759).

DANE TECHNICZNE

- Pełna specyfikacja - do pobrania na www.radiomed-radiologia.pl

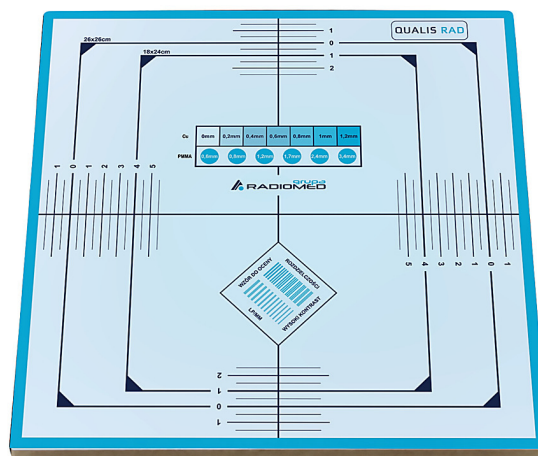

FANTOM QUALIS RAD


Testują Państwo aparat z fluoroskopią - telekomando, ramię-C lub angiograf? Właściwy jest wtedy fantom QUALIS RAD-FLUO.

OPCJONALNE wyposażenie do tego fantomu



Walizka transportowa

Dedykowana do fantomu, z wyprofilowaną pianką.

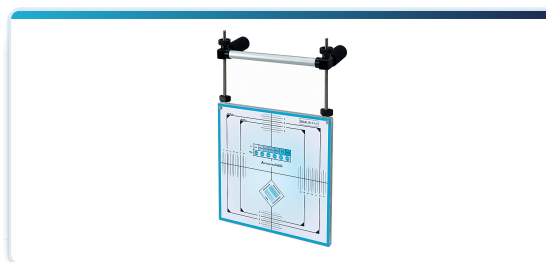

Uchwyt

Uchwyt do statywu zdjęć płucnych - bez konieczności przyklejania fantomu.

FANTOM QUALIS PMMA

ZASTOSOWANIE: Aparaty kostno-płucne (ogólnodiagnostyczne) · przyłózkowe · telekomando · ramię-C · angiografy

W ZESTAWIE

Zestaw płyt PMMA w wybranym wariantcie wyposażenia - od samych płyt po komplet z walizką, statywem i trójnogiem. Instrukcja obsługi i wzory raportów z testów (automatyczne obliczenia wyniku i oceny testu).

ZAKRES TESTÓW

- Kontrola systemu **AEC**
- Standardowy pacjent w testach radiografii i fluoroskopii

ZGODNOŚĆ

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12.12.2022 r. w sprawie testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych (Dz. U. 2022 poz. 2759).

DANE TECHNICZNE

- Pełna specyfikacja - do pobrania na www.radiomed-radiologia.pl



FANTOM QUALIS PMMA

OPCJONALNE wyposażenie do tego fantomu




PREMIUM

Walizka transportowa

Dedykowana do zestawu płyt, z wyprofilowaną pianką. W wariantcie PREMIUM duża skrzynia na kółkach, w wariantcie COMFORT mniejsza skrzynia aluminiowa.



COMFORT

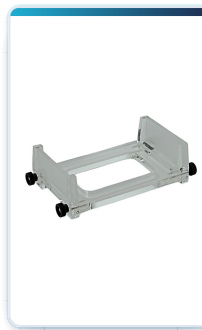

Statyw

Przezroczyste PMMA, do pozycjonowania płyt w tej samej geometrii. Obok statyw z kompletem płyt.



Trójnóg

Regulacja wysokości 80–100 cm, kompatybilny ze statywem.

ZESTAW QUALIS INTEGRA RAD


PREMIUM

COMFORT

STANDARD

ZASTOSOWANIE: Aparaty kostno-płucne (ogólnodiagnostyczne) · przyłóżkowe

Co otrzymują Państwo: fantom do geometrii i rozdzielczości oraz zestaw płyt PMMA w jednym zamówieniu. Razem pokrywają **pełen zakres testów podstawowych** aparatów kostno-płucnych i przyłóżkowych. **Wariant STANDARD również pozwala wykonać wymagany zakres testów podstawowych.** Do aparatów z fluoroskopią - telekomando, ramię-C, angiograf - właściwy jest zestaw QUALIS INTEGRA RAD-FLUO.

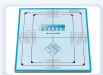

QUALIS RAD

geometria, kolimacja, rozdzielczość



QUALIS PMMA

kontrola AEC, standardowy pacjent




PREMIUM

Oba fantomy z pełnym wyposażeniem

QUALIS RAD: fantom · uchwyt · walizka

QUALIS PMMA: zestaw płyt · walizka PREMIUM
· statyw · trójnóg

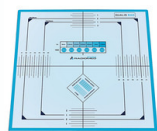


COMFORT

Oba fantomy, każdy we własnej walizce

QUALIS RAD: fantom · walizka

QUALIS PMMA: zestaw płyt · walizka
COMFORT

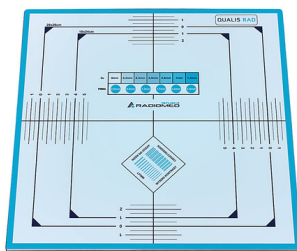

STANDARD

Same fantomy - wyposażenie do dokupienia w dowolnym momencie

QUALIS RAD: fantom

QUALIS PMMA: zestaw płyt

ZESTAW QUALIS INTEGRA RAD

Pełny skład każdego z trzech wariantów zestawu.

ZESTAW QUALIS INTEGRA RAD	PREMIUM	COMFORT	STANDARD
FANTOM QUALIS RAD			
 Fantom QUALIS RAD fantom do geometrii - w każdym wariantcie	✓	✓	✓
 Walizka transportowa walizka z wyprofilowaną pianką	✓	✓	-
 Uchwyt mocuje fantom przy ścianie płucnej	✓	-	-
FANTOM QUALIS PMMA			
 Zestaw płyt PMMA Standardowy pacjent - w każdym wariantcie	✓	✓	✓
 Walizka COMFORT mniejsza skrzynia aluminiowa	-	✓	-
 Walizka PREMIUM duża skrzynia na kółkach	✓	-	-
 Statyw trzyma płyty pionowo	✓	-	-
 Trójnóg regulacja 80–100 cm	✓	-	-

OPCJONALNIE (REKOMENDOWANE) - pełne wdrożenie personelu do wykonywania testów.

PAKIET WDROŻENIOWY		QUALIS START ↗		Od SZKOLENIA przez TESTY po gotowy RAPORT	
¹ SZKOLENIA Pełen cykl testów podstawowych. Krok po kroku wykonywane i omawiane wszystkie testy.	² RAPORTY Wzory raportów omówione punkt po punkcie - co wpisać, jak czytać wynik i ocenę testu.	³ TESTY Pierwszy pełen cykl testów na aparacie, z gotowym raportem z testów.	⁴ CERTYFIKATY Certyfikat uczestnictwa dla każdej przeszkolonej osoby.	⁵ WSPARCIE Kontakt telefoniczny i mailowy przy kolejnych testach.	
SZKOLENIE W WYBRANEJ FORMIE					
 SZK-STAC Stacjonarnie Dojeżdżamy do placówki - szkolenie z testów na aparacie - wykorzystując fantomy w praktyce.		 SZK-LIVE Online na żywo Sesja z wykładowcą w czasie rzeczywistym - pytania i pokaz testów krok po kroku - na bazie prezentacji.		 SZK-VOD Nagranie wideo Film instruktażowy, dostęp bez ograniczeń czasowych. Pytania telefoniczne i mailowe.	
EFEKT WDROŻENIA: Testy Podstawowe wykonywane samodzielnie.					

ZESTAW QUALIS INTEGRA RAD


ZASTOSOWANIE: Aparaty kostno-płucne · przyłóżkowe

QUALIS RAD

- Wymiar zewnętrzny **310 × 310 × 8 mm**
- Kolimacja **26 × 26 cm** i **18 × 14 cm**
- Podziałka ze skokiem **co 5 mm**
- Wysoki kontrast - materiał **Pb 0,1 mm**, zakres **0,6-5,0 LP/mm**
- Elementy **Cu** niskiego kontrastu: 0 · 0,2 · 0,4 · 0,6 · 0,8 · 1,0 · 1,2 mm
- Elementy **PMMA** niskiego kontrastu: 0,6 · 0,8 · 1,2 · 1,7 · 2,4 · 3,4 mm
- Ocena prostopadłości wiązki w zakresie **0°-1,5°**

QUALIS PMMA

- Wykonane z **przezroczystego PMMA**
- **7 płyt** 300 × 300 × 20 mm
- **1 płyta** 300 × 300 × 10 mm
- **1 płyta kompensacyjna** (opcjonalnie)
- Tolerancja wymiarowa **± 5 %**
- Możliwość zamówienia innej konfiguracji grubości i szerokości

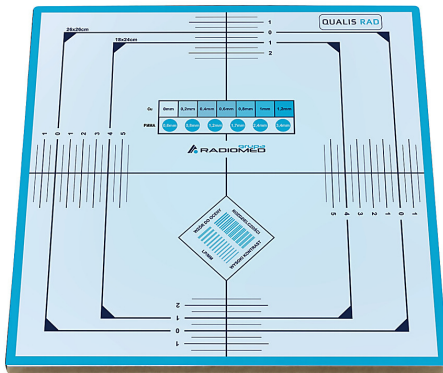

FANTOM QUALIS RAD



FANTOM QUALIS PMMA

Mają Państwo pytania techniczne? Doradzimy i dobierzemy konfigurację do Państwa aparatu.

biuro@radiomed-radiologia.pl · 510 447 870

KONTAKT I ZAMÓWIENIA

Porozmawiajmy o Państwa gabinecie

Doradzimy, który fantom i który wariant odpowiada Państwa
aparatom. Przygotujemy ofertę na sam fantom albo z **Pakiem
wdrożeńowym QUALIS START**.

SPRZEDAŻ FANTOMÓW

tel. **510 447 870**

biuro@radiomed-radiologia.pl

PAKIET WDROŻENIOWY QUALIS START

Szkolenie, pierwsze testy

gotowy raport z testów i certyfikat



ZAPYTANIE W 10 SEKUND

Proszę zeskanować telefonem - otworzy się gotowa wiadomość z tematem.
Wystarczy dopisać model aparatu.

KATALOG STOMATOLOGIA

Testują Państwo także aparaty stomatologiczne - panoramiczne, cefalometryczne, wewnątrzustne lub CBCT 3D?
Mamy dla nich osobny katalog: **Fantomy QUALIS - Stomatologia**. Prześlemy na życzenie.